



*It is time to move forward – damit ist sicherlich  
die Ergänzung unserer Kollektion Spezialschuhe für  
Diabetiker gemeint!*

---

Wir stellen Ihnen hier **19 modische Diabetikerschuh-Modelle für Damen vor**. 15 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere neue, sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. Die 4 anderen Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und anzupassen. Auch finden Sie in diesem Katalog **4 Diabetikerschuh-Modelle für Herren**.

**NEU! 8 Modelle aus unsere Damen-Kollektion jetzt in 2 Weiten lieferbar!**

**Spezialschuhe für Diabetiker**  
Auf Rezept verordnungsfähig mit der  
Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010

## 7004 Ilse Lace

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK/M | Laufsohle: PU Sport

N18oK = normal  
N18oM = weit



Art. 70054.2.414

- Taupe Leder mit taupe Stretchsilky-Leder  
Leisten: N18oK



Art. 70054.2.801

- Grau Fantasy Wildleder mit grau Stretchsilky-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM



Art. 70054.3.001

- Schwarz Fantasy Wildleder mit schwarzem Stretchleder  
Leisten: N18oK



Art. 70054.2.417

- Taupe Fantasy Leder mit taupe Stretchsilky-Leder  
Leisten: N18oK

## 7006 Irma Lace

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK/M | Laufsohle: PU Sport

N18oK = normal  
N18oM = weit



Art. 70056.2.430

- Sand Nubuk/Leder mit Sand Stretchsilky-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM



Art. 70056.4.001

- Schwarz Leder / Nubuk mit schwarzem Stretchnubuk  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM



Art. 70056.3.101

- Weiss /Silver Leder mit weissem Stretchleder  
Leisten: N18o K

## 7104 Iris

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK | Laufsohle: PU Sport



Art. 70058.2.414

- Taupe Leder mit taupe Stretchsilky-Leder  
Leisten: N18oK



Art. 70058.2.430

- Sand Leder mit Sand Stretchsilky-Leder  
Leisten: N18oK

## 7102 Ilke Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK/M | Laufsohle: PU Sport

N18oK = normal  
N18oM = weit



Art. 70057.2.430

- Sand Leder mit Sand Stretchsily-Leder  
Leisten: N18oK



Art. 70057.2.417

- Taupe Fantasy Leder mit taupe Stretchsily-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM



Art. 70057.2.001

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsily-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM

## 7000 Ingrid Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK/M | Laufsohle: PU Sport / EVA

N18oK = normal  
N18oM = weit

Art. 70053.2.001

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM | Laufsohle : PU Sport



Art. 70053.2.830

- Anthrazit (grau) Leder mit anthrazit Stretchsilky-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N18o K – N18oM | Laufsohle : EVA



## 7102 Polish Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK | Laufsohle: EVA



Art. 70037.4.001

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchnubuk  
Leisten: N18oK



Art. 70037.4.501

- Taupe Leder mit taupe Stretchnubuk  
Leisten: N18oK

## 7001 Carmen Lace

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N18oK | Laufsohle: EVA



Art. 70052.2.001

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder  
Leisten: N18oK

## 7201 Isa

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N180K | Laufsohle: PU Sport



Art. 70059.2.002

- Schwarz Fantasy Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder  
Leisten: N180K

## 7203 Claudia Lace *(mit Reißverschluss)*

Größen: 3 – 9 (UK) | Leisten: N180K/M | Laufsohle: PU Sport

N180K = normal  
N180M = weit



Art. 70055.2.001

- Schwarz Nubuk mit schwarzem Stretchsilky-Leder  
AUCH LIEFERBAR IN WEITE M  
Leisten: N180 K – N180M





## 7501 Orlando Lace

Größen: 6 – 12 (UK) | Leisten: N39K | Laufsohle: PU



Art. 70048.3.001

● Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder

## 7501 Orlando Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) | Leisten: N39K | Laufsohle: PU



Art. 70049.3.001

● Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder

## 7508 Stone Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) | Leisten: N39K | Laufsohle: PU

Art. 70041.2.301

- Braun Leder mit braun Stretchnubuk



## 7600 Tough Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) | Leisten: N39K | Laufsohle: PU

Art. 70047.2.001

- Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder



# NIMCO Made4You Spezialschuhe für Diabetiker

Nimco Made4You produziert und vertreibt Spezialschuhe in unterschiedliche Ausführungen und für mehrere Indikationsbereiche. Unser Ziel ist, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Füße zu gewährleisten. Die Herstellung von Schuhen mit perfekter Passform ist unsere Motivation, um so einen Beitrag zu einer besseren Mobilität für unsere Kunden zu leisten. Dies wird zu einer besseren Lebensqualität führen. Eine wichtige Voraussetzung, um dieses zu verfolgen ist die Verbindung zwischen unserem Unternehmen, unserer Mitarbeiter und unserer Kunden!

## Nimco Made4You weiß wie man geht!

Mit mehr als hundert Jahren Erfahrung (1904), sind wir stolz sagen zu können, dass wir wesentliche Erfahrung beim Verkauf und der Produktion von Schuhen haben. Unsere Produktionsabteilung arbeitet mit erfahrenen und ausgebildeten Orthopädie-Schuhtechnikern. Unser Werk – **Nimco Portugal** – liegt im Zentrum der portugiesischen Schuhindustrie. Hier legen wir großen Wert auf die Fortbildung unserer Mitarbeiter, um unsere hohen Qualitätsansprüche zu gewährleisten.

Nimco Made4You Portugal ist ein von APCER zertifiziertes Unternehmen. Die ISO-9001 Qualitätssicherung, ISO-14001 Umweltschutz-Sicherung und ISO-18001 Hygiene- und Arbeitsschutz-Sicherung gehören zu unseren Normen. Unsere Produktion ist konform mit der Norm und stimmt mit den EU-Richtlinien überein. Als Firmengruppe ist Nimco Made4You schon seit Jahren ISO-9001 zertifiziert und führend bei der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von orthopädischen- und Spezialschuhen.

## Besonderheiten:

- vielfältige Modellauswahl – ab Lager lieferbar.
- mehrere Weiten – neben die Standard Weite K sind auch 8 Damen-Modelle in eine M-Weite lieferbar.
- ideale Passform – **alle Schuhe werden über eigens entwickelte Naturform Leisten gebaut. In der Ferse haben wir die Form des Leistens einem schlankem Rückfuss angepasst um den Schlupfeffekt zu vermeiden** und so eine optimale Passform zu erzielen.
- herausnehmbares Kork/Leder Fußbett und ein Platzhalter aus Kork.
- separater Versteifungssohlen auf Wunsch lieferbar – also nicht fest im Schuh integriert.
- spezielles Diabetikerfutter – atmungsaktiv, waschbar und hautfreundlich.
- Xsensible-Inside-Stretchleder – zum optimalem Komfort!
- spezielles Diabetikerfutter – atmungsaktiv, waschbar und hautfreundlich.
- Ausreichend Platz für individuelle Einlagen-Versorgung bzw. Diabetes adaptiertes Fußbett (10MM) – auf Wunsch können die Schuhe mit extra Raum für die Bettung ausgerüstet werden. (Sonderanfertigung)

## Indikationsbereiche:

Diabetische Polyneuropathie mit ausgeprägter Neuropathie (Sensibilitätsverlust) und ausgeprägter Angiopathie (Durchblutungsstörungen), verbunden mit bereits vorhandenen oder abgeheilten Ulcera und/oder sonstigen mechanischen Irritationen, die zu regionalen Druckspitzen führen.



## Versteifungssohlen

Auf Wunsch können Sie diese Versteifungssohlen separat bestellen.

Diese Versteifungssohlen sind einfach zuzuschneiden und zu verkleben und sind thermoplastisch verformbar. Stärke : 2mm.

Artikelnummer 9112 = **für Damenschuhe** in Gr. 3-9 (nur ganze Größen)


Artikelnummer 9113 = **für Herrenschuhe** in Gr. 6-12 (nur ganze Größen)



## Xsensible Inside-Stretchleder

### Die Vorteile und Eigenschaften:

- Die Technologie sorgt dafür, dass sich das Leder 70% in der Breite, aber nur 30% in der Länge dehnt. Tests haben gezeigt, dass das Leder auch nach 500.000 Schritten immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.
- Die oberste Schicht ist aus echtem Leder und die unteren Schichten sind aus Lycra aufgebaut mit einem natürlichen Latex-Schaum-Material dazwischen.
- Alle Schuhe aus dieser Katalog sind mit dieser Xsensible-Inside-Technologie ausgerüstet, sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- Xsensible-Inside Stretchleder hat die besondere Eigenschaft das dieses Material atmungsaktiv ist und für ein optimales Fußklima sorgt.

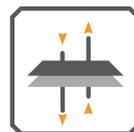

BREATHABLE



WATER-REPELLENT



LIGHTWEIGHT

## Maß Tabelle für Damenleisten N180K (normal)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
3½	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
4½	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
5½	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
6½	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
7½	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
8½	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM.

Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung.

Die Schuhe haben einen Bettungsstärke von zirka 10MM.

Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

## Maß Tabelle für Damenleisten N180M (weit)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3½	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4½	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5½	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6½	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7½	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8½	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM.

Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung.

Die Schuhe haben einen Bettungsstärke von zirka 10MM.

Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

## Maß Tabelle für Herrenleisten N39K (normal)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
6½	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
7½	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
8½	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
9½	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
10½	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11	304,9	109,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
11½	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2



Alle Angaben sind in MM.

Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung.

Die Schuhe haben einen Bettungsstärke von zirka 10MM.

Der Ballenmaß / Spannmaß / Fersenmaß ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

Massangaben  
sind netto - ohne  
Einlagenstärke!

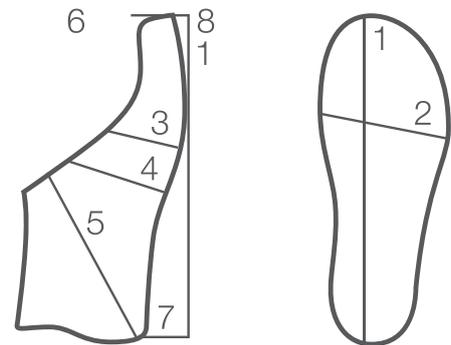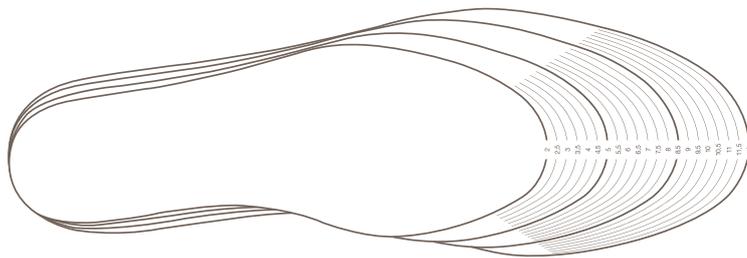

- 1 Länge der Brandsohle
- 2 Breite am Ballen
- 3 Ballenmaß
- 4 Spannmaß
- 5 Fersenmaß
- 6 Zehenhöhe
- 7 Fersensprengung
- 8 Zehensprengung

